



MICRODERMABRASION BLACKHEAD REMOVER | 7 IN 1



Skin Scan & Personal
Routine Guide



UltraSpin Exfoliation
Technology



AirPulse Suction
Deep Pore Cleansing



MicroDermabrasion Technology
for Skin Impurities



Red Light Active
Regeneration Technology



Cell Renewal
System



Skin Rejuvenation
Technology

Inklusive
Face Cap
Body Cap
Blackhead Cap
2 Body Discs
8 Face Discs
Filter

**Create your personal
Skincare Routine**

and Download our GESKE App



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com

DAS SOLLTEST DU WISSEN

TIPP 1

Folge den Anweisungen auf der linken Seite, um problemlos zwischen den Aufsätzen zu wechseln. Beginne immer mit der niedrigsten Intensität und übe so wenig Druck wie möglich auf die Haut aus.

TIPP 2

Dieses Gerät hat ein erhöhtes Narbenrisiko für Menschen mit Fitzpatrick-Hauttypen V und VI sowie ein erhöhtes Hyperpigmentierungsrisiko für Menschen mit Fitzpatrick-Hauttypen III-V. Verwende es auf eigene Gefahr und mit besonderer Sorgfalt.

TIPP 3

Es wird dringend empfohlen, 3-4 Wochen vor der Verwendung des Gerätes direkte Sonneneinstrahlung zu meiden. Und nach der Verwendung solltest Du Deine Haut 4-8 Wochen lang nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen oder einen Sonnenschutz mit mindestens Lichtschutzfaktor 30 verwenden.



Rotes LED-Licht
Anti-Aging



Ein/Aus
1-2 Sekunden gedrückt halten



Vakuumsaugung
5 Level



Spinning Exfoliation
5 Intensitätsstufen



Body Cap



Face Cap



Blackhead Cap



Body Discs




Face Discs



Filters



Verschiedene Aufsätze
Einfach austauschbar

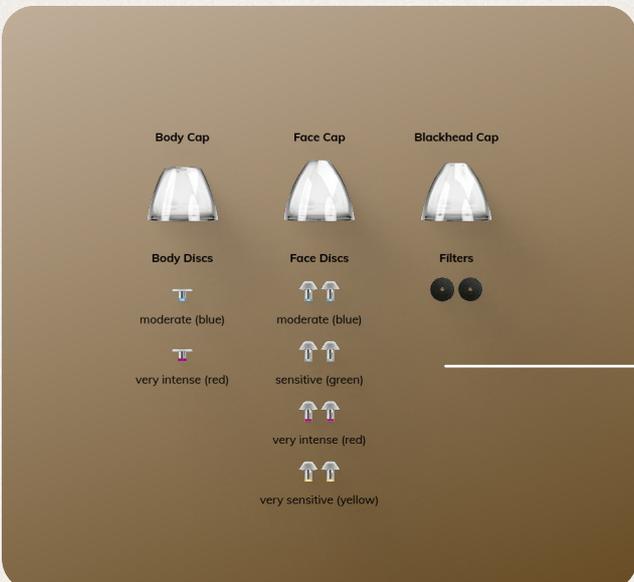

DIE ERSTEN SCHRITTE

Verabschiede Dich von Mitessern und begrüße reine, strahlende, makellose Haut mit unserem SmartAppGuided™ MicroDermabrasion Blackhead Remover | 7 in 1.



BESONDERE TIPPS

ÜBEN

Bevor Du das Gerät zum ersten Mal verwendest, teste es an Deinem Arm oder Bein. Vermeide den Kontakt des Geräts mit der empfindlichen Hautpartie um Deine Augen herum.

SEI VORSICHTIG

Beginne mit der niedrigsten Intensität und übe einen sehr sanften Druck aus. Arbeite Dich langsam an die höheren Intensitäten heran, während Du mit dem Gerät vertrauter wirst.

BEWEGEN

Um Verletzungen und Narbenbildung zu minimieren, verwende das Gerät nicht zu lange an einer Stelle. Bewege es weiter über Dein Gesicht.

STRAFF ZIEHEN

Ziehe die Haut straff, um eine sanftere Bewegung zu erzielen, und führe nur einen Durchgang pro Hautfläche durch. Achte darauf, die empfindliche Hautpartie um die Augen herum zu meiden.



FACIAL MICRODERMABRASION

VORBEREITUNG

Starte mit einem gereinigten, Make-up-freien Gesicht. Platziere eine Peelingscheibe der gewünschten Intensität auf das Gerät und befestige dann die Face Cap.

EINSCHALTEN

Aktiviere die MicroDermabrasion Technology for Skin Impurities und die Red Light Active Regeneration Technology, indem Du den Powerknopf 2 Sekunden lang gedrückt hältst. Wähle die gewünschte UltraSpin Exfoliation-Intensität mit den +/- Tasten.

PEELING

Teste die Funktion auf Deinem Arm, um Dich damit vertraut zu machen. Lege das Gerät dann unter das Kinn und gleite es in einer Auswärts- und Aufwärtsbewegung entlang der Kieferlinie zum Ohr. Beginne wieder am Kinn und wiederhole die Bewegung über dem bereits behandelten Bereich - Strich für Strich, bis die gesamte Gesichtshälfte bis zum Haaransatz abgedeckt ist.

AUSSCHALTEN

Schalte das Gerät aus, indem Du den Powerknopf 2 Sekunden lang gedrückt hältst. Trage nun ein GESKE-Serum oder eine Feuchtigkeitscreme auf die behandelte Haut auf, um diese zu beruhigen. Reinige Dein Gerät nach jedem Gebrauch mit einem GESKE Device Cleanser.

Erstelle Deine persönliche Hautpflegeroutine

und downloade die GESKE App



Innovative App



Video Guided



KI-gestützter Skin Scan



Experten Tipps



Personalisierte Routine



In App Belohnungen



WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN. VOR GEBRAUCH LESEN.

Lies vor dem ersten Gebrauch die Sicherheitsinformationen. Bewahre beide Gebrauchsanweisungen auf.

Dein Produkt auf einen Blick

Dein Produkt ist ein multifunktionales MicroDermabrasions-Gerät. Es kann sicher bis zu 1 Mal, höchstens 2 Mal pro Woche verwendet werden, aber nicht mehr als einmal täglich. Bitte nicht häufiger verwenden. Für maximale Sicherheit und optimale Ergebnisse folge bitte immer Deiner persönlichen Hautpflegeroutine, die Du mit der GESKE App erstellt hast.

Verwendungshinweise

Bevor Du das Gerät zum ersten Mal benutzt, solltest Du diese Sicherheitsbroschüre und den Quick Start Guide vollständig lesen. Beide Handbücher sollten aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen zum sicheren Gebrauch sowie zu technischen und rechtlichen Informationen enthalten. Das Gerät ist ein Hautpflegeprodukt für Erwachsene, kein Medizinprodukt und kein Produkt mit medizinischen oder sonstigen heilenden Eigenschaften. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Beachtung der Kurzanleitung, der hier aufgeführten Warnhinweise und der personalisierten Anwendungsempfehlungen der GESKE App.

Technische Daten

Materialien: Silikon, ABS PC, Acryl, Polyester | **Lagertemperatur:** -5 - +60 °C/23 - 140 °F | **Batterie:** Kapazität des Li-Ion 3,7 V-Akkus: 600 mAh | **Maximaler Ladestrom:** 370 mA | **Ladespannung:** 5V | **Ladezeit:** ca. 3 Stunden | **Betriebszeit:** Die Anwendungszeit variiert je nach aktivierten Technologien & Intensitäten. | **I-Schnittstelle:** USB | **I-Programme:** Spinning Exfoliation: 5 Geschwindigkeiten, Vakuumsauger: 5 Geschwindigkeiten, LED Light Technology: 1 Farbe

Das Produkt ist nicht für die Verwendung unter den folgenden Bedingungen geeignet:

Nach einer Laserbehandlung oder einem chemischen Peeling sowie nach Gesichtsoperationen, sowohl kosmetischer als auch medizinischer Art.

In den folgenden Fällen ist eine Rücksprache mit einem Arzt erforderlich, um zu klären, ob das Produkt für Dich geeignet ist:

Wenn Du eine Herzerkrankung hast oder schwanger bist. Die Sicherheit der Anwendung während der Schwangerschaft ist nicht erwiesen.

Weitere Informationen zur Verwendung:

Dieses Gerät hat ein erhöhtes Narbenrisiko für Menschen mit Fitzpatrick-Hauttypen V und VI sowie ein erhöhtes Hyperpigmentierungsrisiko für Menschen mit Fitzpatrick-Hauttypen III-V. Verwende es auf eigene Gefahr und mit besonderer Sorgfalt. Es wird dringend empfohlen, direkte Sonneneinstrahlung 3-4 Wochen vor der Verwendung des Gerätes zu vermeiden. Nach der Nutzung des Gerätes muss für die folgenden 4-8 Wochen direkte Sonneneinstrahlung vermieden werden. Wenn Du Sonnenlicht nicht vermeiden kannst, achte darauf, einen Sonnenschutz mit mindestens Lichtschutzfaktor 30 zu verwenden. LSF 50 wird empfohlen. Vermeide Sport sowie Schwimmen und trage nach einer MikroDermabrasion Session 24 Stunden lang kein Make-up auf. Um Hautinfektionen vorzubeugen, wird empfohlen, nach der Anwendung eine antiseptische Creme aufzutragen. Gründlich befeuchten. Bei intensiver Anwendungen mit höheren Intensitäten ist mit oberflächlichen Abschürfungen zu rechnen. Je höher die Intensität, desto höher das Risiko. Konsultiere im Zweifelsfall Deinen Arzt, bevor Du das Gerät verwendest. Um Reizungen oder leichte Blutergüsse zu vermeiden, benutze die Saugfunktion niemals länger an derselben Stelle als von der GESKE-App empfohlen. Beginne immer mit der niedrigsten Intensität und steigere diese langsam je nach Bedarf. Eine milde und gleichmäßige Anwendung ist erwünscht. Eine höhere Intensität bedeutet ein höheres Risiko für unerwünschte Narbenbildung. Übe nur leichten Druck aus. Das Produkt kann intensives Licht ausstrahlen. Vermeide daher, es in Richtung oder in der Nähe eines offenen Auges aufzutragen. Verwende das Produkt nicht auf gereizter, verletzter Haut oder auf offenen Wunden (nach Verletzungen jeglicher Art) sowie bei bakteriellen oder viralen Infektionen der Haut (weder im Anwendungsbereich noch anderswo). Dieses Produkt ist nicht zur Behandlung medizinischer Hautzustände oder Krankheiten bestimmt. Wenn Du medizinische Hautzustände oder Krankheiten hast, konsultiere Deinen Dermatologen, bevor Du dieses Produkt verwendest. Benutze das Produkt nicht, wenn es 1) ungewöhnlich warm ist, 2) mechanisch beschädigt oder verbogen ist, 3) verformt ist. Sollten während der Anwendung Schmerzen und/oder Beschwerden auftreten, breche die Anwendung ab und suche ärztlichen Rat. Die Augenpartie ist sehr empfindlich: Sei in diesem Bereich besonders vorsichtig und vermeide jeglichen Kontakt des Produkts mit den Augenlidern oder dem Auge selbst. Verwende das Produkt nur wie in Deiner persönlichen Routine empfohlen. Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, Dein Produkt nicht mit anderen zu teilen und die Aufsätze bei Bedarf auszutauschen. Das Produkt ist zur kosmetischen Anwendung auf Lippen bestimmt. GESKE übernimmt keine Haftung für schädliche Folgen, die durch die Anwendung an anderen Körperstellen oder sonstige unsachgemäße Verwendung, Anschluss an ungeeignete Spannungsquellen, verunreinigte Leitflüssigkeit oder Bälle entstehen. Stelle vor dem Laden immer sicher, dass Stecker und Steckdose vollständig trocken sind. Andernfalls kann es zu Stromschlägen, einem Kurzschluss oder einem Brand kommen. Das Produkt darf nicht verwendet werden, während es an die Steckdose angeschlossen ist.

Warnhinweise

Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Verwendung!

Verwende das Produkt nur wie im Quick Start Guide und der Videoanleitung beschrieben. Wenn Du noch Fragen hast, wende Dich bitte an unseren Kundensupport unter support@geske.com.

Verletzungsgefahr durch Feuer/Entzündung!

Lösche das Produkt nicht mit Wasser. Werfe das Produkt nicht ins Feuer.

Verletzungsgefahr durch defekte Batterien!

Unsachgemäßer Umgang mit Batterien kann zu einer unkontrollierten exothermen Reaktion führen. Entsorge das gesamte Produkt in diesem Fall umgehend und ordnungsgemäß.

Verletzungsgefahr für Kinder!

Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

Flüssigkeit kann den Ladekreislau beschädigen und Deine Gesundheit gefährden. Entferne das Produkt während der Reinigung vom Ladekabel/Stromkreis.

Beschädigungsgefahr durch Magnetfeld!

Magnetische Felder können auf mechanische und elektronische Komponenten wie beispielsweise Herzschrittmacher einwirken. Verwende das Produkt nicht direkt über einem Herzschrittmacher. Für weitere Informationen wende Dich bitte an Deinen behandelnden Arzt. Lege keine Karten mit Magnetstreifen (z.B. Kreditkarten) in die Nähe des Produkts, da diese durch die Produktmagnete beschädigt werden können.

Beschädigungsgefahr durch wechselnde Umgebungstemperaturen!

Veränderte Umgebungstemperaturen (z.B. nach dem Transport) können zur Bildung von Kondenswasser führen. Betätige das Produkt in diesem Fall erst, wenn es sich an die neue Umgebungstemperatur angepasst hat. Setze Dein Produkt niemals direktem Sonnenlicht, extremer Hitze oder kochendem Wasser aus.

Sicherer Einsatz bis zu einer Umgebungstemperatur von 50 °C/122 °F.
Beschädigungsgefahr durch zu langes Laden!
Trenne nach jedem Ladevorgang das Ladekabel vom Stromkreis.
Sicheres Laden bis zu einer Umgebungstemperatur von 45 °C/113 °F.



Hersteller-Informationen nach § 18 Abs. 4 ElektroG. Nach dem deutschen Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) informieren wir Dich hiermit im Zusammenhang mit einem zukünftigen Recycling des vorliegenden Elektrogeräts wie folgt:

1. Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll
Erreicht das erworbene Produkt einmal das Ende der Betriebslebensdauer, so ist es als Altgerät nicht im Hausmüll zu entsorgen, sondern einem separaten Sammel- und Rückgabesystem zuzuführen.

2. Batterien, Akkus und Lampen
Herausnehmbare Batterien oder Akkus, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vorher zerstörungsfrei zu entfernen und entsprechend der geltenden Recyclingvorschriften getrennt zu entsorgen. Dies gilt nicht für Altgeräte, welche einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeit der Rückgabe von Altgeräten
Möglichkeit der Rückgabe von Altgeräten Du kannst Altgeräte unentgeltlich bei kommunalen Sammelstellen, dem Vertreter des Produktes oder dem Hersteller abgeben. Zur Rücknahme verpflichtet sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei einem Online-Vertrieb, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreter haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in unmittelbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Online-Vertrieb für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreter unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart pro Rückgabe. Als Hersteller sind wir an das Rücknahmesystem des Anbieters „take-e-back“ angeschlossen. Passende Rücknahmestellen findest du unter folgender URL: <https://www.take-e-back.de>

4. Datenschutz
Soweit personenbezogene Daten auf dem Altgerät vorhanden sind, raten wir dazu, die Daten vor der Entsorgung zu löschen.

5. Bedeutung des Symbols der „durchgestrichenen Mülltonne“
Das auf dem zu entsorgenden Elektro- und Elektronikgerät abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Produktlebensdauer nicht in den Hausmüll gehört, sondern getrennt eine Entsorgung für Elektro- und Elektronikgeräte zuzuführen ist.

Hinweise zum Batteriegesetz:

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien und Akkus sind wir als Händler verpflichtet, Dich als Verbraucher auf folgendes hinzuweisen: Du bist gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus zurückzugeben. Du kannst diese nach Gebrauch an uns zurücksenden, in einer kommunalen Sammelstelle oder unentgeltlich im Handel vor Ort zurückgeben.



Die durchgestrichenen Mülltonnen bedeuten, dass eine Entsorgung von Batterien und Akkus nicht über den Hausmüll erfolgen darf. Das chemische Zeichen darunter bedeutet im Einzelnen: Pb = Batterie enthält Blei, Cd = Batterie enthält Cadmium, Hg = Batterie enthält Quecksilber.

Ergänzende Hinweise zu Lithiumbatterien/Akkus:

Lithium Batterien oder Akkus erkennst Du am chemischen Zeichen „Li“. Bitte achte darauf, dass bei der Rücksendung von Lithiumbatterien oder -akkus oder der Abgabe an Sammelgefäße für Altbatterien beim Handel und bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern die Batterien oder Akkus vollständig entladen sind und die mit den Zeichen „+“ und „-“ gekennzeichneten Kontaktfächen mit Klebeband von Dir isoliert werden, um jegliche Brandgefahr zu vermeiden.



GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlin erklärt, dass alle elektronischen Produkte im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen der anwendbaren europäischen Richtlinien 2014/30/EU und 2011/65/EU stehen.

Limitation of liability

GESKE Beauty Tech GmbH and/or their retailers are liable for damages caused by intentional or grossly negligent behaviour of GESKE Beauty Tech GmbH, a representative or vicarious agent, in accordance with legal directives. With the exception of injury to life, limb or health, and breach of essential contractual obligations (cardinal obligations), GESKE Beauty Tech GmbH and/or their retailers are only liable for damages which can be attributed to intentional or grossly negligent behaviour. This also applies to indirect damages, in particular lost profits. Moreover, liability with regard to consumers due to an assumed guarantee, except in the case of intentional or grossly negligent behaviour, or where there is an injury to life, limb or health or a breach of essential contractual obligations (cardinal obligations) is limited to the typical, foreseeable damages on conclusion of the contract, and also to the level of the average damages typical for this contract. This also applies to indirect damages, in particular lost profits. With regard to companies, except in the case of injury to life, limb and health or intentional or grossly negligent behaviour of GESKE Beauty Tech GmbH, and/or its retailers liability is limited to the typical, foreseeable damages on conclusion of the contract, and also to the level of the average damages typical for this contract. This also applies to indirect damages, in particular lost profits. No liability will be accepted for damages due to: Non-compliance with this manual/improper use/ Unauthorised alterations/ Technical modifications/Use of unapproved spare parts/Use of unapproved accessories Claims for liability due to the German product liability legislation remain unaffected.