



LIP VOLUMIZER & BOOSTER | 4 IN 1



Skin Scan & Personal
Routine Guide



Targeted Instant
Lip Volumizing



Ultra-Volume
Technology



Natural Lip Color
Revitalizing

**Lippen
zum
Küssen**



**Create your personal
Skincare Routine**

and Download our GESKE App



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com



DAS SOLLTEST DU WISSEN

TIPP 1

Stelle sicher, dass Deine Lippen befeuchtet sind, bevor Du das Gerät aufsetzen. Wir empfehlen unser GESKE feuchtigkeitsspendendes Serum, das die empfindliche Haut der Lippen optimal hydratisiert.

TIPP 2

Die Ultra-Volume Technology polstert Deine Lippen auf und sorgt so für einen sinnlichen Mund. Deine Lippen können sich entspannen, während ein Vakuum zwischen dem Gerät und Deinen Lippen entsteht.

TIPP 3

Reinige Dein Gerät nach jedem Gebrauch mit einem GESKE-Gerätereiniger.



Sofortiges Volumen


Vollere Lippen



Gesamte Lippe

Ergonomische Form

GESKE

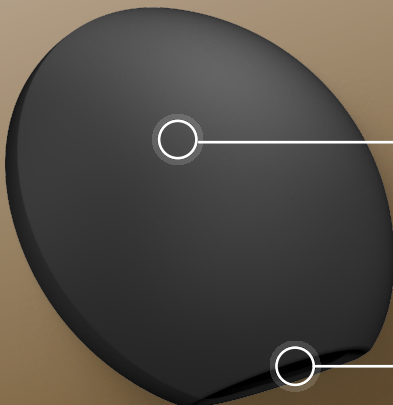

Intensivere Farbe

Belebung der Lippen



Weiche Lippen

Schmollmund garantiert

DIE ERSTEN SCHRITTE

Lerne den SmartAppGuided™ Lip Volumizer & Booster | 4 in 1 kennen: Deinen neuesten Beauty-Begleiter, der Dir im Handumdrehen vollere Lippen verleiht. Diese kleinere Variante ist darauf ausgelegt, gezielt bestimmte Lippenpartien aufzupolstern.



VOLLSTÄNDIGE LIPPENVERGRÖßERUNG

VORBEREITUNG

Starte mit einem gereinigten, ungeschminkten Gesicht. Trage eine speziell formulierte GESKE-Feuchtigkeitscreme oder ein Serum auf und um Deine Lippen herum auf.

VOLUMEN

Platziere die Öffnung des Geräts auf die rechte Seite Deiner Oberlippe. Entspanne Deinen Mund und drücke das Gerät zusammen. Lass die Pumpe los, sodass ein Vakuum zwischen dem Gerät und Deinen Lippen entsteht. Halte das Gerät 15 bis 30 Sekunden lang in der Position.

WIEDERHOLEN

Wiederhole diesen Vorgang nach Belieben - für ein noch intensiveres Ergebnis. Jedoch solltest Du Deine Lippen nicht länger als 3 Minuten mit dem Gerät behandeln. Achte darauf, dass Du für ein gleichmäßiges Ergebnis auch die linke Seite der Oberlippe und beide Seiten der Unterlippe behandelst.

BEENDEN

Spüle das Gerät nach jedem Gebrauch mit milder Seife und Wasser ab und reinige es gründlich mit einem GESKE-Gerätereiniger.

Erstelle Deine persönliche Hautpflegeroutine

und downloade die GESKE App



Innovative
App



Video
Guided



KI-gestützter
Skin Scan



Experten
Tipps



Personalisierte
Routine



In App
Belohnungen



WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN. VOR GEBRAUCH LESEN.

Lies vor dem ersten Gebrauch die Sicherheitsinformationen. Bewahre beide Gebrauchsanweisungen auf.

Dein Produkt auf einen Blick

Dein Produkt ist ein multifunktionaler Lip Plumper. Das Gerät kann bis zu 2 Mal täglich genutzt werden. Bitte verwende es nicht häufiger. Für maximale Sicherheit und optimale Ergebnisse folge immer Deiner persönlichen Hautpflegeroutine, die Du mit der GESKE-App erstellt hast.

Verwendungshinweise

Bevor Du das Gerät zum ersten Mal benutzt, solltest Du diese Sicherheitsbroschüre und die Schnellstartanleitung vollständig lesen. Beide Handbücher sollten aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen zum sicheren Gebrauch sowie zu technischen und rechtlichen Informationen enthalten. Das Gerät ist ein Hautpflegeprodukt für Erwachsene, kein Medizinprodukt und kein Produkt mit medizinischen oder sonstigen heilenden Eigenschaften. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Beachtung der Kurzanleitung, der hier aufgeführten Warnhinweise und der personalisierten Anwendungsempfehlungen der GESKE App. Das Gerät ist wiederaufladbar und ermöglicht einen bequemen und kabellosen Betrieb. Es muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden. Alles, was Du dazu benötigst, ist das mitgelieferte USB-Ladekabel. Das erste Aufladen kann bis zu acht Stunden dauern. Das Kabel muss mit den beiden magnetischen Kontakten an den dafür vorgesehenen Metallkontaktstellen des Geräts andocken. Wenn sich das Ladekabel nicht von selbst verbindet, schließe es an das Stromnetz an und warte. Dadurch wird die magnetische Wirkung reaktiviert und die Kontakte verbinden sich automatisch. Achte darauf, dass die Magnetkontakte nur an den Kontaktstellen des Geräts anliegen und nicht an anderen metallischen Oberflächen.

Technische Daten

Materialien: Silikon | Lagertemperatur: -5 - +60 °C/23-140 °F

Das Produkt ist nicht für die Verwendung unter den folgenden Bedingungen geeignet:

Bei Gerinnungsstörungen, bei Blutungsneigung oder nach Einnahme von blutgerinnungshemmenden Medikamenten (z.B. Acetylsalicylsäure), bei hämorrhagischen Erkrankungen (angeborene Blutgerinnungsstörungen) und/oder bei Einnahme von Medikamenten, die die Blutgerinnung beeinflussen, bei auffälligen Veränderungen im Gesichtsbereich oder Herpes labialis, kurz bzw. in den ersten Wochen nach einer kosmetischen Lippenoperation oder Lippenunterspritzung und bei spürbaren Unreinheiten oder unnatürlich verhärteten Stellen an der Lippe.

In den folgenden Fällen ist eine Rücksprache mit einem Arzt erforderlich, um zu klären, ob das Produkt für Dich geeignet ist:

Wenn Du Lip Filler oder Implantate hast

Weitere Informationen zur Anwendung:

Verwende das Produkt nicht auf gereizten oder verletzten Lippen oder offenen Wunden (nach jeder Art von Verletzung), bei bakteriellen oder viralen Infektionen der Haut (sowohl im Lippenbereich als auch anderswo). Dieses Produkt ist nicht zur Behandlung von Hautkrankheiten oder -beschwerden bestimmt. Wenn Du an medizinischen Hautkrankheiten leidest, konsultiere Deinen Hautarzt, bevor Du dieses Produkt nutzt. Verwende das Produkt nicht, wenn es 1.) beschädigt oder verformt, 2.) verfärbt ist. Verwende das Produkt nur wie in Deiner persönlichen Routine empfohlen. Aus hygienischen Gründen empfehlen wir Dir, Dein Produkt nicht mit anderen Personen zu teilen. Sollten während der Anwendung Schmerzen und/oder Beschwerden auftreten, brich die Anwendung ab und suche einen Arzt auf. Das Produkt ist für die kosmetische Anwendung auf den Lippen bestimmt. GESKE übernimmt keine Haftung für schädliche Folgen, die sich aus der Anwendung an anderen Körperstellen oder sonstiger unsachgemäßer Anwendung ergeben.

Warnhinweise

Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Verwendung!

Verwende das Produkt nur wie im Quick Start Guide und den Videoanleitungen beschrieben. Solltest Du noch offene Fragen haben, wende Dich an unseren Kundensupport unter support@geske.com.

Verletzungsgefahr bei Kindern!

Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.